


FG FRICTION GRIP



DIATECH 
SWISS DENTAL INSTRUMENTS

“金霸王”
多覆层金刚砂车针

Feel the difference!

 瑞士康特齿科集团

球形车针

标准粒度
105-125 μm

ML 524

Fig. No.	801	801	801	801	801	801	805	805	805	806	806	811	811	811	899	368	368
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	020	023	012	014	023	014	016	031	033	037	027	016	020
Head L mm	ML	ML*	ML	ML*	ML	ML	0.9ML*	1.4ML	2.1ML	2.2ML	2.5ML	4.2ML	5ML	7ML	7ML	3.5ML	5ML
订货数量																	

倒锥形车针

双锥形车针

咬合面车针

橄榄球形车针

锥形圆头车针

标准粒度
105-125 μm

ML 524

Fig. No.	855	855	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856L	856L	856L	856L	856L
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	025	012	014	016	018	014	016	018	021	012	014	016	018	016
Head L mm	6ML	6ML	7ML	7ML	8ML	8ML*	8ML*	8ML*	9ML*	9ML*	9ML*	9ML	10ML	10ML	10ML	11ML	12ML
订货数量																	

锥形平头车针

标准粒度
105-125 μm

ML 524

Fig. No.	846	846	846	846	847	847	847	847	848	848	848	848L	845R	846R	847R	877K	877K
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	023	012	014	016	018	012	014	016	018	016	016	016	014	018
Head L mm	6ML*	6ML	7ML*	7ML	8ML	8ML*	8ML*	8ML*	10ML	10ML	10ML	12ML	4ML	6ML	8ML	6ML	6ML
订货数量																	

锥形平头钝边车针

锥形尖头车针

柱形圆头车针

标准粒度
105-125 μm

ML 524

Fig. No.	838	880	881	881	881	881	858	858	858	859	859	859	859	862	862	862	863
ISO Ø 1/10 mm	010	012	010	012	014	016	012	014	016	010	012	014	016	010	012	016	012
Head L mm	4ML*	6ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*	8ML*	10ML	10ML	10ML	10ML	8ML*	8ML*	8ML*	10ML*
订货数量																	

火焰形车针

细粒度
45 μm

F 514

Fig. No.	368	379	392	856	856L	850	848	847R	878K	837R	859	859	863	905	Fig. No.	856	856L	850	848	847R	878K	837R	859	859	863	905
ISO Ø 1/10 mm	023	016	016	016	018	012	014	016	016	012	010	014	012	027	ISO Ø 1/10 mm	016	018	012	014	016	016	012	010	014	012	027
Head L mm	5F	3.5F	8F	8F	11F	10F	10F	8F	8F	8F	10F	10F	10F	2.9F	Head L mm	8F	11F	10F	10F	8F	8F	10F	10F	10F	10F	2.9F
订货数量															订货数量											

特细粒度
25 μm

XF 504

邻面车针				轮状车针			深度标记车针				梨形车针				锥形圆头车针				
015	033	038	044	051	056	751	753	756	799	797	190	191	177	183	187	189	363	364	365
368	379	379	390	392	392	909	909	909	828	828	834	834	830L	830L	830L	830L	849	849	849
023	018	023	014	016	021	040	045	055	026	030	016	021	012	016	020	026	012	016	025
5ML*	3.5ML	5ML*	3ML*	8ML	10ML	1.5ML	1.5ML	2ML	1ML	1ML	6.8ML	6.8ML	4ML*	5ML*	5ML	7ML	4ML	4ML	4ML

柱形尖头车针								末端切削(肩台)车针											
486	372	374	375	378	390	391	719	722	725	615	617	619	651	653	655	278	280	282	293
856XL	850	850	850	850	851	851	886	886	886	878	878	878	879	879	879	839	839	839	845
018	012	014	016	018	012	016	012	014	016	010	012	014	012	014	016	010	012	014	016
12ML	10ML	10ML	10ML	10ML	8ML	8ML	10ML	10ML	10ML	8ML	8ML*	8ML	10ML*	10ML*	10ML	ML	ML	ML	4ML

柱形平头车针								柱形平头钝边车针											
631	635	638	660	664	667	670	203	206	210	226	227	252	254	237	239	241	243	265	267
878K	878K	878K	879K	879K	879K	879K	835	835	835	836	836	837	837	836R	836R	836R	836R	837R	837R
010	014	016	012	014	016	018	010	012	014	012	014	012	014	008	010	012	014	012	014
8ML*	8ML*	8ML*	10ML	10ML	10ML	10ML	4ML*	4ML*	4ML*	6ML	6ML*	8ML*	8ML	6ML*	6ML*	6ML*	6ML*	8ML*	8ML*


粗粒度 150 μm																				
568	097	136	016	039	752	188	457	465	379	330	345	061	071	255	684	699	MLX 534			
863	801	811	368	379	909	830L	856	856L	850	847	848	6052	6056	837	880	881	Fig. No.	MLX	5MLX	
016	023	033	023	023	040	020	025	016	018	016	014	018	018	014	014	016	ISO Ø 1/10 mm			
10ML*	10ML	5MLX*	5MLX*	1.5MLX	5MLX	7MLX	10MLX	10MLX	10MLX	8MLX*	10MLX	8MLX	10MLX	8MLX	6MLX*	8MLX*	Head L mm			
																	订货数量			

超细粒度 15 μm																								
099	018	041	046	179	400	493	505	532	542	562	040	492	504	510	545	561	UF 494							
801	368	379	390	830L	852	858	859	860	862	863	379	858	859	859	862	863	Fig. No.	UF	5UF	8UF	10UF	10UF	8UF	10UF
023	023	023	014	012	012	012	010	014	010	012	023	012	010	014	012	012	ISO Ø 1/10 mm							
XF	5XF	5XF	3XF	4XF	6XF	8XF	10XF	5XF	8XF	10XF	5UF	8UF	10UF	10UF	8UF	10UF	Head L mm							
																	订货数量							


DIATECH “金霸王” 金刚砂车针使用说明：

DIATECH Multilayer Diamonds “金霸王” 车针是选用天然南非金刚砂、采用先进制作技术和独特生产工艺制成的多覆层金刚砂车针。由于每支车针含有更多层次的金刚砂颗粒，使用过程中即使砂粒折断或脱落，仍有锐利的新金刚砂颗粒替代并继续发挥作用。磨削效率更高，使用寿命更长。其外附纯金镀层，增加了车针的抗腐蚀性及美观性。生产工艺精密，同心性极佳，不损伤手机。


“金霸王” 车针独特的多覆层金刚砂

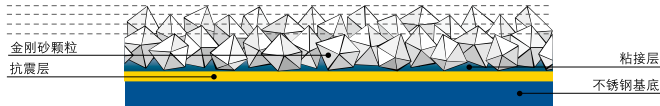

DIATECH “金霸王” 多覆层金刚砂车针使用寿命更长，磨削效率更高！

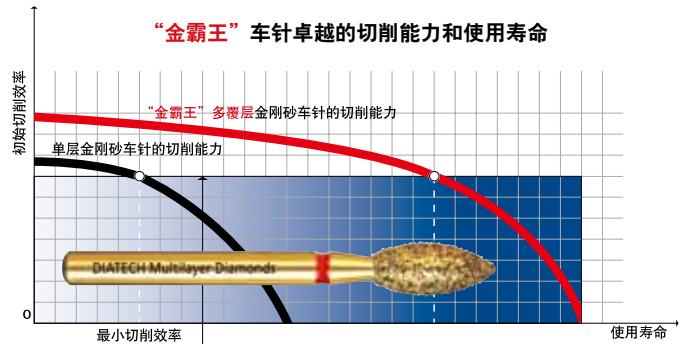

如何找到适宜的“金霸王” 金刚砂车针？

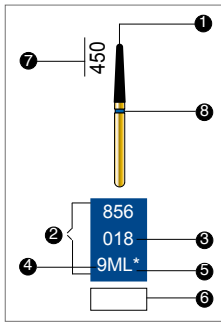

- 1、实际尺寸的金刚砂车针示意图
- 2、参考货号 (856-018-9ML)
- 3、车针头部直径 (1/10 mm)
- 4、车针头部长度 (mm)
- 5、ML 代表金刚砂粒度
* 表示还可提供短柄金刚砂车针 (FG313)
- 6、订货数量

- 7、订货号
- 8、颜色也可表示不同的金刚砂粒度

- 粗粒度 = 150 μm (MLX)
- 标准粒度 = 105-125 μm (ML)
- 细粒度 = 45 μm (F)
- 特细粒度 = 25 μm (XF)
- 超细粒度 = 15 μm (UF)

手机推荐速度列表：

车针头部直径 (1/10mm) 转速范围 (转 / 分钟) 最大转速 (转 / 分钟)

008 - 010	75.000 - 150.000	450.000
012 - 014	60.000 - 110.000	450.000
016 - 018	45.000 - 88.000	450.000
021 - 023	40.000 - 75.000	300.000
025 - 027	30.000 - 65.000	160.000
029 - 031	25.000 - 56.000	140.000
033 - 040	22.000 - 45.000	120.000
042 - 050	20.000 - 37.000	95.000
055 - 060	17.000 - 32.000	80.000
065 - 080	13.000 - 26.000	60.000
085 - 100	12.000 - 24.000	58.000
120 - 140	8.000 - 15.000	35.000
160 - 180	6.000 - 12.000	27.000
200 - 220	5.000 - 11.000	27.000

前、后牙冠 / 桥预备套装



货号 250065AA

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten/ Switzerland
Tel. 0041/71/75 75 300
Fax 0041/71/75 75 301
E-mail: info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223/ U.S.A.
Tel. 001/330/916 8800
Fax 001/330/916 7077
E-mail: info.us@coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼
B座2单元1103-1104 编: 100044
电话: (010) 62161985 62123251
传真: (010) 62123252
E-mail: china@coltene-whaledent.com
http://www.coltene-whaledent.bj.cn

授权代理商：

