



HANEL

咬合检查系列产品



位于Langenau工厂和办公室

HANEL

精确的咬合检查

现代牙科技术中，殆关系的检查和纠正是两项十分严苛的技术。殆干扰可能引起功能障碍并导致牙齿的损伤和患者的痛苦。为避免殆干扰，即使是最小的咬合高点也应该被追溯。这就要求材料能够在不同环境和不同材料上进行有效，精确的标记。



HANEL产品线包括一系列临床用和技工室用的咬合检查产品。充分满足实际工作中标记点、线、面接触的不同要求，材料具有精确的厚度，良好的弹性和拉伸强度，多种的颜色。

HANEL还提供一系列辅助工具方便临床操作。

目录

咬合纸	6	-	7
咬合箔	8	-	9
咬合绢	10	-	10
金属咬合箔	11	-	11
高点指示剂	12	-	13
工具	14	-	14
其他附件	15	-	16

说明

-  单面有色
-  双面单色
-  双面双色

根据测试材料的不同厚度以不同的方式呈现咬合接触。



200µ 咬合纸

较厚的咬合检查材料，在有咬合压力的区域可呈现较大的印记。



80µ 咬合纸

梯度性咬合印记，中等厚度，质地柔软。



80µ 和 40µ 咬合纸

中等厚度咬合检查材料。



12µ 咬合纸

精密的咬合检查材料，可精确的标记高点。

建议采用以下材料—颜色的组合：

- 黄金 蓝色
- 瓷 蓝色
- 银汞合金 绿色/红色
- 复合树脂 蓝色/红色

蓝色咬合纸最适于应用在特别闪亮的表面（黄金或瓷），因其与软组织的肉色可形成强烈的对比。

咬合纸



200 μ 咬合纸

适用于咬合的最初检查，用以区分高、低咬合力区。

- 快速而整体的了解咬合接触的状况。
- 使用后呈梯度性印记，即咬合力越低，印记越轻，反之亦然。
- 咬合纸为条形，实用型包装盒，取用方便。
- 用可视性的标志标志简化了殆关系的判断。



300 条
(18mm × 50mm)



货号

480 392
480 397

咬合纸



80 μ + 40 μ 咬合纸

用于中等精细度咬合检查

有成卷包装，或C形，马蹄形及长条形，可简单、迅速、精确的标记，无需使用镊子。

- 双面有色
- 双面单色或双面双色
- 有更深的颜色更利于标记

			80 μ	40 μ
			货号	货号
	72 条		480 367	480 337
			480 364	
				480 332
	144 条		480 377	
			480 374	
	144 条 (20 mm × 105 mm)		480 387	
			480 384	
	120 条 (22 mm × 110 mm)			480 352
				480 354
				480 357
	15 m (22 mm 宽)			480 322
				480 327

咬合箔



22 mm

12 μ 咬合箔

用于精细咬合调整


HANEL 能够完全满足现代殆学的要求，咬合印记精确，抗撕拉力强，有弹性，超薄，颜料无毒，不掉色。

两种宽度：

- 宽度为22mm，单面有色、双面单色或双面双色。成卷，包装盒配备切割刀，取用方便。
- 宽度为80mm，单面有色或双面单色，成卷，配包装盒。

- 极薄
- 非常柔软
- 精确标记咬合高点和微小接触
- 颜料层无毒
- 先进的颜料转移技术，不褪色

咬合箔

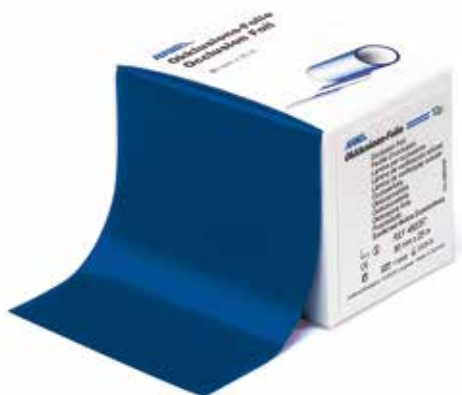

80 mm



22 mm × 25 m



80 mm × 25 m

	货号	货号
	480 021	480 031
	480 022	480 032
	480 023	480 033
	480 027	480 037
	480 041	480 051
	480 042	480 052
	480 043	480 053
	480 047	480 057
	480 165	

初始装

4卷5米单面有色咬合箔
(黑色, 红色, 绿色, 蓝色) 480 563

初始装

4卷5米双面有色咬合箔
(黑色, 红色, 绿色, 蓝色) 480 564

咬合纸放置盒和其他附件
请参看第14页

咬合绢



80µ 咬合绢

优质天然真丝制品，梯度性咬合印记，清晰准确，适用于临床和技工室。

- 极佳的标记能力
- 非常柔软
- 先进的颜料转移技术，不退色



22 mm × 10 m



80 mm × 10 m

货号

货号



480 201

480 211



480 202

480 212



480 203

480 213



480 207

480 217

金属咬合箔



8μ 金属咬合箔

用于咬合的最终精细检查

由金属箔制成，无色，适用于咬合的最终精细检查；当牙列处于正常咬合时，可将咬合箔拉出，而当肌肉紧张时，则咬合箔无法抽出。



8 mm x 5 m

货号

480 180

高点指示剂



Okklu-top

检查邻接点和冠桥内部的接触点，用于技工室。

- 粒度极细
- 喷雾色彩均匀一致
- 特殊的喷嘴设计，即使是很小的区域也能覆盖
- 在黄金，瓷和塑料牙上都能精确标记
- 即使是很小的接触点也能被指明
- 对呼吸道无刺激
- 使用水或酒精可轻易去除



罐装 (75 ml)

货号



480 410

480 411

高点指示剂



Ghm-高点指示剂

Ghm-高点指示剂为技工室制作冠桥时使用。

包装为100ml一罐。

- 使用喷嘴更精确
- 使用水或酒精可轻易去除




罐装 (100ml)

货号

- 480 402
- 480 403
- 480 407

咬合纸夹持镊

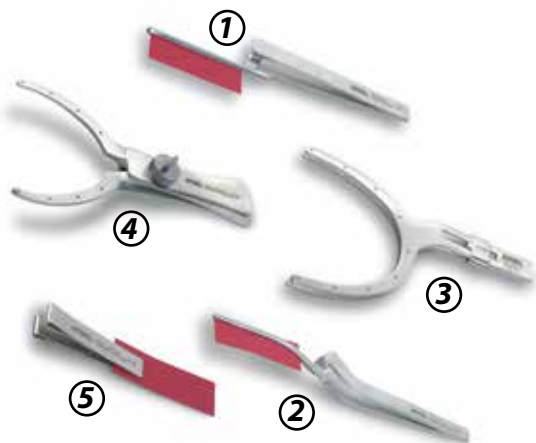

咬合纸夹持镊

使用超薄的咬合箔时必须使用精确的咬合纸夹持镊。
所有的咬合纸夹持镊都可以高压蒸汽灭菌。

咬合纸夹持镊

直形

①

货号

480 610

曲形

②

480 612

双叉形咬合纸夹持镊

(技工室用)

③

480 613

手柄的开关设计确保操作时不受
殆架切导针的干扰。

(临床用)

④

480 614

折叠后放入患者口腔内，然后单手
打开做全牙弓咬合检查。

咬合纸夹

用于夹持咬合纸

5支装

⑤

480 640

咬合纸放置盒



咬合纸放置盒

- 适用于宽度22mm的咬合纸卷
- 无色透明
- 附带切割刀

货号

480 620

可将两个或多个咬合纸放置盒并排置入咬合纸放置盒搁架中或使用咬合纸放置盒连接杆连接。

附件



咬合纸放置盒搁架

可分别搁置2个、3个和4个咬合纸放置盒，整齐、方便。

咬合纸放置盒连接杆

可将2个、3个或4个咬合纸放置盒连接在一起。

货号

可放置2个咬合纸盒	480 632
可放置3个咬合纸盒	480 633
可放置4个咬合纸盒	480 634

货号

480 624

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent Ltd.

The President Suite
Kendal House, Burgess Hill, Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / U.K.
Tel +44 1444 235486
Fax +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

www.coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044
电话: (010) 62161985 62123251
传真: (010) 6 2123252
E-mail: china@coltenewhaledent.com
[http: www.coltenewhaledent.bj.cn](http://www.coltenewhaledent.bj.cn)

授权代理商:

